

# DILUWEL UP!®

DILUTEUR GRAVIMÉTRIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION

 StepUpYourLab

2026

 ALLIANCE  
BIO EXPERTISE





- ✓ **Stable**
- ✓ **Précis**
- ✓ **Rapide**
- ✓ **Standardisé**
- ✓ **Avec traçabilité automatisée**

1

2




## Broyez l'échantillon



**DILUWEL UPI®**



MIXWEL UPI®

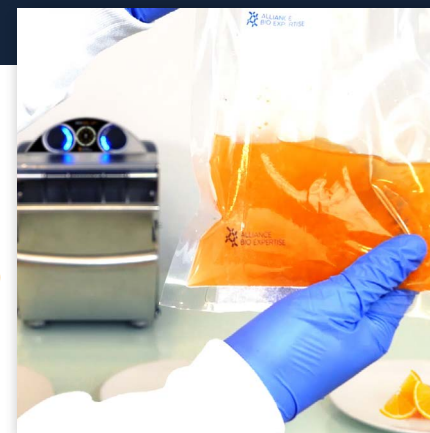

**ISO**  
6887-1

*Pesez l'échantillon d'essai avec une tolérance de  $\pm 5\%$  dans un récipient stérile [...]. Ajoutez une quantité de diluant égale à  $9 \times \text{MG}$  ou  $9 \times \text{VmL}$  [...]. Cette quantité doit être mesurée en masse, avec une tolérance de  $\pm 2\%$  [...]*

**ISO**  
**7218**

Les dilutions gravimétriques nécessitent une balance et un distributeur de liquide programmable [...] Placez l'équipement sur une surface horizontale stable [...] nivelée et à l'abri des vibrations.

## Hautes performances :

- Distribution rapide : 225 ml en 12 secondes
- Niveau à bulle digital pour une meilleure stabilité
- Pompes déportées pour optimiser l'espace et limiter les vibrations
- Distribution motorisée :  
pas de contamination croisée

## Ergonomique :

- Pensé pour le confort de l'utilisateur
- Interface intuitive
- Facile à nettoyer
- Léger : 6.9kg

## Multi-modes :

- Dilution
- Dosage
- Poudres
- Pré-pesée
- Gestion des milieux concentrés
- Gestion des suppléments







## Fingerstop™

Embout long avec balle de sûreté : évitez les contaminations croisées



## Facile à manipuler

Léger (6.9kg) et empreinte compacte : facile à nettoyer et permet un gain d'espace sur la paillasse



## Indicateurs de couleurs



Codes couleurs intuitifs pour la conformité ISO : valeurs ajustables pour la pesée de l'échantillon et la tolérance finale de la dilution



## Pompes indépendantes



La stabilité de la balance est protégée des vibrations de la pompe. Organisez votre espace de travail à votre convenance !

## Ergonomique



Le diluteur le plus bas du marché : ouverture de sac à 29 cm de la paillasse. Affichage des informations à hauteur des yeux et commandes à portée de main pour plus de confort !



## Traçabilité complète



Obtenez toute la traçabilité de vos dilutions automatiquement : avec des tickets, par export USB, en consultant la Labpage® ou via le LIMS

### Livrés avec le DILUWEL UP!


Manuel d'utilisation, alimentation électrique, Dilupump Up! (DILW2201), jeu de tuyau 6.4mm avec embout de distribution Fingerstop™ (DILW2002), Patawel + : antiadhésif longue durée (DILW3010), support sac 400mL (DILW2034), certificat de contrôle qualité et rapport de métrologie.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Distribution rapide et précise	12 sec. pour 225ml / (9 sec. en mode turbo)
Précision	>99%
Mode turbo	✓
Niveau à bulle intégré	✓
Tête de distribution motorisée	✓
Nombre de programmes	Illimité
Pesée	0.1g to 4000g
Facteur de dilution	1.00 to 99
Modes de dilutions	Dilution / Dosage / Gestion des milieux concentrés
Fonctionnalités additionnelles	Poudres / Pré-pesée / Auto-start / Suppléments
Portoir en acier inoxydable - longue durée de vie	✓
Appareil étanche - facile à nettoyer	✓
Traçabilité	Tickets, clé USB, Labpage® ou LIMS
Pompes amovibles « Plug & Play »	De 1 à 4 pompes
Écran tactile intuitif 3.5"	✓
Compacité (L x l x H)	250 x 275 x 400mm
Poids	6.9 kg
Alimentation / Puissance	100 - 240V / 50 - 60 Hz / 120W
Garantie	1 an
Pays d'origine	France - Union Européenne

# DILUWEL UP!®

Connectez jusqu'à **4 pompes** :

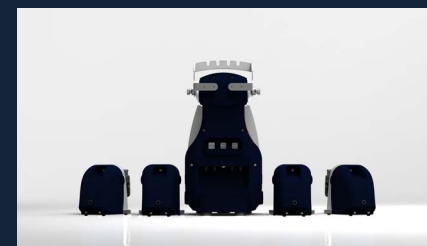



**ÉQUIPEMENTS - RÉACTIFS - CONSOMMABLES**  
POUR LA MICROBIOLOGIE INDUSTRIELLE, CLINIQUE ET LA RECHERCHE



**UNE GÉNÉRATION D'AUTOMATES CONNECTÉS**  
POUR LA TRAÇABILITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DU LABORATOIRE



**UNE PRODUCTION D'ÉQUIPEMENTS MADE IN FRANCE**  
80% DES APPROVISIONNEMENTS SE FONT À MOINS DE 100KM



**UNE ÉQUIPE DE MICROBIOLOGISTES À VOTRE ÉCOUTE**  
ACCOMPAGNEMENT - FORMATIONS - SOLUTIONS FINANCIÈRES



**PRÉSENT DANS PLUS DE  
90 PAYS**