

DILUWEL UP!® EDGE

DILUTEUR GRAVIMÉTRIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION
FOR COSMETIC APPLICATION

 StepUpYourLab

 ALLIANCE
BIO EXPERTISE



DILUWEL UPI est un dilueur gravimétrique fiable, robuste et précis destiné aux applications cosmétiques, permettant de diluer des échantillons en distribuant la quantité exacte de diluant en quelques secondes.

- ✓ Stable
- ✓ Précis
- ✓ Rapide
- ✓ Standardisé
- ✓ Avec traçabilité automatisée

StepUpYourLab

1

Connectez votre diluant



MEDIAWEL® - BAGGYWEL® - BOUTELLES

2

Diluez l'échantillon



DILUWEL UPI®

3

Tracez toutes vos données



LABPAGE®

ISO

21148

La suspension initiale est préparée à partir d'un échantillon d'au moins 1 g ou 1 ml du produit testé [...]. Notez la masse ou le volume exact de l'échantillon. Transférez l'échantillon (S) du produit dans un récipient approprié et effectuez une dilution précise et adaptée [...]. Notez le facteur de dilution (d).

ISO

7218

Les dilutions gravimétriques nécessitent une balance et un distributeur de liquide programmable [...] Placez l'équipement sur une surface horizontale stable [...] nivelée et à l'abri des vibrations.

DILUWEL UPI® EDGE

DILUTEUR GRAVIMÉTRIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION
FOR COSMETIC APPLICATION

 StepUpYourLab

Hautes performances :

- Distribution motorisée : aucune contamination croisée
- Embout de précision pour une distribution précise
- Niveau à bulle digital pour une meilleure stabilité
- Pompes déportées pour optimiser l'espace et limiter les vibrations


Ergonomique :

- Pensé pour le confort de l'utilisateur
- Interface intuitive
- Facile à nettoyer
- Léger : 6.9kg

Multi-modes :

- Dilution
- Dosage
- Pré-dose
- Pré-pesée
- Gestion des milieux concentrés
- Gestion des suppléments



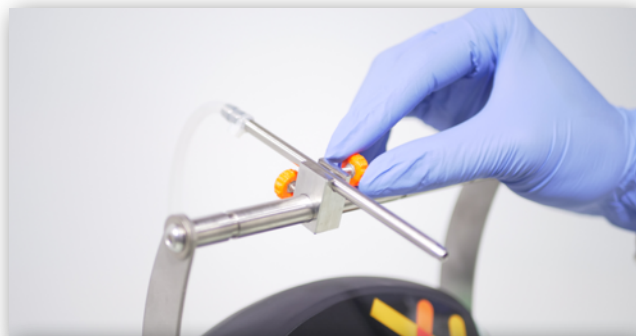

Embout de précision

Embout long : évitez les contaminations croisées



Facile à manipuler

Léger (6.9kg) et empreinte compacte : facile à nettoyer et permet un gain d'espace sur la paillasse



Indicateurs de couleurs

Codes couleurs intuitifs : valeurs ajustables pour la pesée de l'échantillon et la tolérance finale de dilution



Pompes indépendantes



La stabilité de la balance est protégée des vibrations de la pompe.

Organisez votre espace de travail à votre convenance !

Ergonomique



Support réglable en hauteur pour une distribution optimale. Affichage des informations à hauteur des yeux et commandes à portée de main pour plus de confort !



Traçabilité complète



Obtenez toute la traçabilité de vos dilutions automatiquement : avec des tickets, par export USB, en consultant la **Labpage®** ou via le LIMS

Livrés avec le DILUWEL UP! EDGE

Manuel d'utilisation, alimentation électrique, Dilupump Up! (DILW2201), jeu de tuyau 6.4mm avec embout de distribution Fingerstop™ (DILW2002), Patawel + : antiadhésif longue durée (DILW3010), Support de bouteille ajustable (DILW2204), certificat de contrôle qualité et rapport de métrologie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Précision	>99%
Niveau à bulle intégré	✓
Tête de distribution motorisée	✓
Nombre de programmes	Illimité
Pesée	0.1g to 3000g
Facteur de dilution	1.00 to 99
Modes de dilutions	Dilution / Dosage / Gestion des milieux concentrés
Fonctionnalités additionnelles	Poudres / Pré-pesée / Auto-start / Suppléments
Support de bouteille ajustable en acier inoxydable	✓
Appareil étanche - facile à nettoyer	✓
Traçabilité	Tickets, clé USB, Labpage® ou LIMS
Pompes amovibles « Plug & Play »	De 1 à 4 pompes
Écran tactile intuitif 3.5"	✓
Compacité (P x L x H)	275 x 250 x 400mm
Poids	6.9 kg
Alimentation / Puissance	100 - 240V / 50 - 60 Hz / 120W
Garantie	1 an
Pays d'origine	France - Union Européenne

DILUWEL UP!® EDGE

Découvrez la gamme Up! en vidéo !





ÉQUIPEMENTS - RÉACTIFS - CONSOMMABLES
POUR LA MICROBIOLOGIE INDUSTRIELLE, CLINIQUE ET LA RECHERCHE



UNE GÉNÉRATION D'AUTOMATES CONNECTÉS
POUR LA TRAÇABILITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DU LABORATOIRE



UNE PRODUCTION D'ÉQUIPEMENTS MADE IN FRANCE
80% DES APPROVISIONNEMENTS SE FONT À MOINS DE 100KM



UNE ÉQUIPE DE MICROBIOLOGISTES À VOTRE ÉCOUTE
ACCOMPAGNEMENT - FORMATIONS - SOLUTIONS FINANCIÈRES



**PRÉSENT DANS PLUS DE
85 PAYS**