

POLYWEL UP!®

REMP LISSEUR DE TUBES ET FLACON NOUVELLE GÉNÉRATION

 StepUpYourLab

2025

 ALLIANCE
BIO EXPERTISE



1

Préparer le milieu

Diluant ou Gélase

MEDIAWEL®



Conforme aux normes :

ISO
11133

ISO
7218

GMP

ISO 7218 - 5.7.1 : Un préparateur de milieux de culture est principalement conçu pour la stérilisation de volumes importants de milieux (>1 l). Il est constitué d'un récipient pour la mise en température, d'une chemise d'eau et d'un agitateur continu [...] d'une jauge de température, d'un manomètre, d'un minuteur, d'une soupape de sécurité [...] d'un verrou de sécurité empêchant l'ouverture tant qu'une température inférieure à 80°C n'est pas atteinte.

2

Distribuer le milieu

Diluant ou Gélase

DISTRIWEL® - POLYWEL® - DOSYWEL® - DILUWEL®



OPTIMISER VOTRE DOSYWEL UP!

Vos cadences augmentent au laboratoire ?

Boostez votre capacité de production :

Branchez simplement la DOSYWEL UP! au POLYWEL UP!



POLYWEL UP[®]

REMPLEUSEUR DE TUBES ET FLACON NOUVELLE GÉNÉRATION

Hautes performances :

- Capacité : plus de 1000 tubes (ø18mm) ou 40 bouteilles (1L - ø 100mm)
- Distribue 1000 tubes en 30 minutes (tubes de 9ml)
- Précision : 98%
- Adapté à tous types de contenants (tubes, flacons, bouteilles...)
- Programmes illimités

Ergonomie :

- Racks autoclavables
- Indicateurs lumineux
- Facile à nettoyer


Adaptable :

- Utilisez vos propres racks
- Différents embouts de distribution :

ø 1.6mm - ø 3.2mm - ø 6.4mm - ø 8mm

PRÉCISION → VITESSE



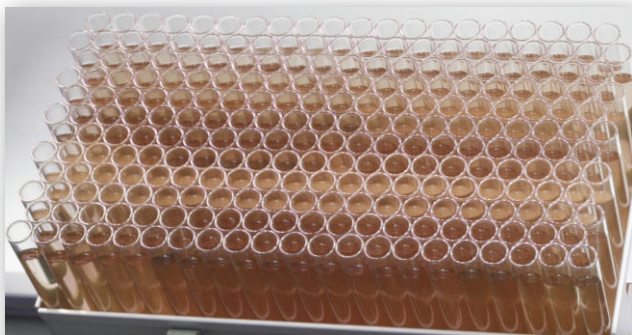

Productivité


Distribue 1000 tubes en 30 minutes en autonomie.

Appareil totalement automatisé



Adaptable

La hauteur du bras automatisé est réglable et s'adapte à différentes tailles de contenants

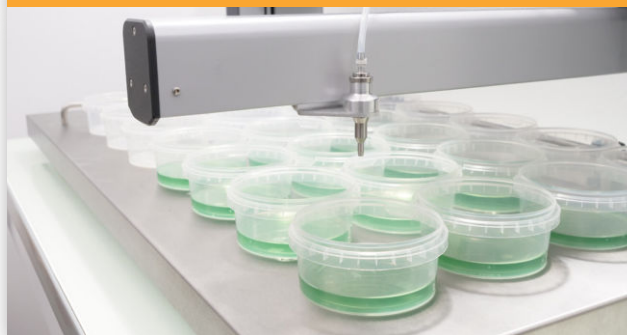

Distribution précise




Distribue avec une précision de 98% grâce aux performances de la DOSYWEL UP!



Facile à nettoyer



La surface de l'appareil est en acier inoxydable et donc facilement nettoyable

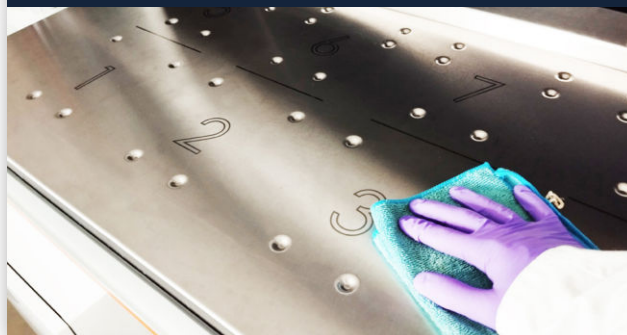

Racks haute qualité



Bénéfiez de racks autoclavables de qualité pouvant être chargés directement à partir de l'emballage d'origine des contenants



Indicateurs lumineux



Soyez facilement informé de la fin du cycle grâce aux LEDS clignotantes sur les côtés de l'appareil



Livré avec :

POLYWEL UP! - Ref : POLW1201

Manuel utilisateur, alimentation, jeu de tuyau 3.2 mm avec embout de distribution (POLW2008), grand rack (POLW2002)

POLYWEL UP! + DOSYWEL UP! - Ref : POLW1201D

POLYWEL UP! (POLW1201), Manuel utilisateur, alimentation, jeu de tuyau 3.2 mm avec embout de distribution (DOSW2003)

CARACTÉRISTIQUES


Volume de distribution	De 1 à 9999.9 ml
Vitesse ajustable	5 – 100% / 10-450 rpm
Temps de distribution pour 1000 tubes (9ml)	30 minutes
Nombre de tubes par racks	Grand rack : 250 / Petit rack : 120
Nombre de programmes	Illimité
Diamètre des tuyaux	1.6 mm / 3.2 mm / 6.4 mm / 8mm
Débit	1.2 L/min maximum (POLYWEL UP mode)
Calibration	En début de cycle et/ou en cours de cycle après plusieurs doses
Taille maximale des contenants	Hauteur : 223 mm
Dimensions externes des racks (L x W x H)	Grand rack : 440mm x 220mm x 110 mm / Petit rack : 240mm x 220mm x 110mm
Dimensions internes des racks (L x W)	Grand rack : 390mm x 195mm / Petit rack : 190mm x 190mm
Dimensions POLYWEL UP! (L x W x H)	1150mm x 605mm x 620mm
Puissance électrique POLYWEL UP!	120 - 240V ($\pm 10\%$) 50 - 60 Hz / 120W
Puissance électrique DOSYWEL UP!	120 - 240V ($\pm 10\%$) 50 - 60 Hz / 120W
GARANTIE	1 an
Pays d'origine	France – Union Européenne

POLYWEL UP!®




SUPPORT TECHNIQUE

- **Expérience fabricant** : vous bénéficiez de l'expertise d'A.B.E., 20 ans d'expérience dans les automates de laboratoire, avec des compétences multilingues !
- **Expertise de réseaux locaux** : votre distributeur local est membre de notre réseau exclusif. Nos partenaires ont été formés dans nos locaux en France mais aussi à l'étranger, en Europe, Asie, Afrique, Moyen-Orient et Amériques. Nos distributeurs mondiaux sont soigneusement sélectionnés pour leur approche de service et leur orientation client.
- **Disponibilité et réactivité** : notre équipe est joignable par e-mail, skype et téléphone. Êtes-vous à l'autre bout du monde ? Nous mettrons tout en oeuvre pour vous apporter l'expertise dont vous avez besoin, rapidement et surtout de manière pertinente !

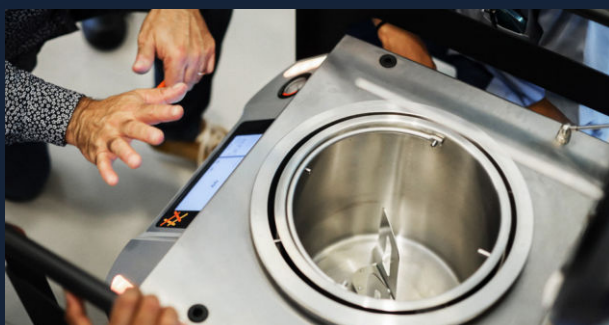

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ

Suivez l'actualité d'A.B.E autour du monde !

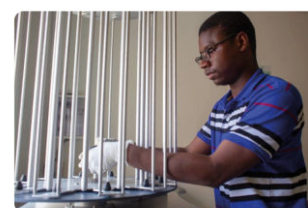



ÉQUIPEMENTS - RÉACTIFS - CONSOMMABLES
POUR LA MICROBIOLOGIE INDUSTRIELLE, CLINIQUE ET LA RECHERCHE



UNE GÉNÉRATION D'AUTOMATES CONNECTÉS
POUR LA TRAÇABILITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DU LABORATOIRE



UNE PRODUCTION D'ÉQUIPEMENTS MADE IN FRANCE
80% DES APPROVISIONNEMENTS SE FONT À MOINS DE 100KM



UNE ÉQUIPE DE MICROBIOLOGISTES À VOTRE ÉCOUTE
ACCOMPAGNEMENT - FORMATIONS - SOLUTIONS FINANCIÈRES



**PRÉSENT DANS PLUS DE
90 PAYS**